

Nitto

Innovation for Customers

ゆう き ばん

優肌絆®

サージカルテープ



株式会社ニトムズ

優肌 YU-KI




角質層を保護する、肌に優しいサージカルテープ。

角質剥離の少ないゲル粘着剤を用いることにより、固定力をそこなうことなく、剥がすときの痛みや肌への負担を抑えた低刺激性のサージカルテープです。


特徴

- 貼り替えによる物理的な刺激を和らげ、かぶれ・かゆみを抑えます。
- 粘着面に角質層が付着しないので、粘着力が低下しません。
- 剥がすときの痛みを和らげます。
- 貼り直しができます。

角質剥離面積率の比較（貼付8時間後）

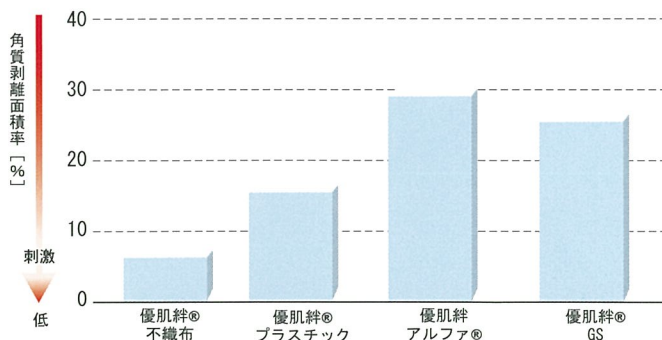

剥離後のテープの表面写真

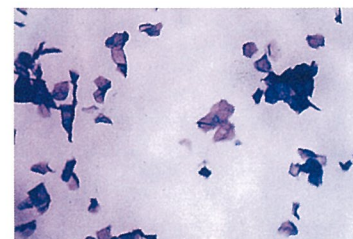


貼付部位：ヒト背部
貼付時間：8時間
観察倍率：×125
（社内実験データ）

優肌絆®は、角質の剥離量が少なくなっています。

角質保護システム Skin Protection System

剥離時の刺激を軽減して
角質層を守る、「優肌」ゲル粘着剤。


「優肌」ゲル粘着剤は、貼付・剥離による物理的な刺激（角質層の損傷）を抑えます。従来の粘着剤が貼りかえ時に角質層まで剥離し、いたみやかぶれの原因となるのに対し、「優肌」ゲル粘着剤は軟らかく皮膚の凸凹になじみやすく、優しく剥離することができます。

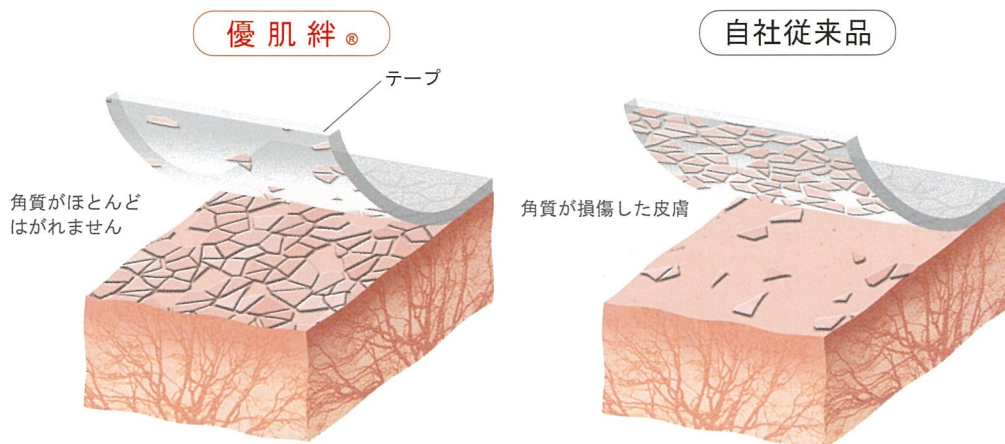

Line-up


基材：不織布

角質層を保護する皮膚に優しい不織布テープ。4種類から用途に合わせてお選びいただけます。

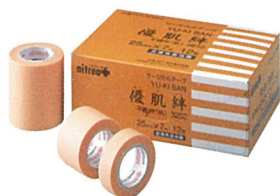

優肌絆不織布（肌）

優肌絆シリーズのベストセラー。不織布素材のソフトな風合いと通気性。肌色で目立ちません。

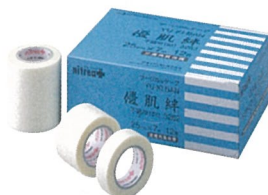


優肌絆不織布（白）

清潔感のある白色の優肌絆。



優肌絆（スキンカラー）

紫外線による皮膚障害（サンバーン）を引き起こす UV-B をほとんどカットします。

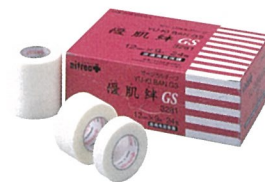

優肌絆 GS

従来の優肌絆不織布に比べ皮膚粘着力がアップし、重ね貼りしやすくなりました。ミシン目を入れ、手切れ性が向上しました。

基材：ポリオレフィン

角質層を保護する皮膚に優しいプラスチックテープ。剥がすときの痛みをやわらげます。



優肌絆プラスチック

肌に貼っても目立ちにくい透明の優肌絆。微細な穴があいていることで、通気性がありカット性にも優れています。



優肌絆アルファ

優肌絆プラスチックの進化版。伸びのあるプラスチック素材を使用し、肌の動きにフィットします。

規 格

優肌絆不織布（肌）

■ 基材 不織布

品番	サイズ	入数 / 化粧箱
3251	12mm×7m	24 巻
3252	25mm×7m	12 巻
3255	50mm×7m	6 巻

優肌絆不織布（白）

■ 基材 不織布

品番	サイズ	入数 / 化粧箱
3261	12mm×7m	24 巻
3262	25mm×7m	12 巻
3265	50mm×7m	6 巻

優肌絆スキンカラー

■ 基材 不織布

品番	サイズ	入数 / 化粧箱
3271	12mm×7m	24 巻
3272	25mm×7m	12 巻

優肌絆 GS

■ 基材 不織布

品番	サイズ	入数 / 化粧箱
3281	12mm×9m	24 巻
3282	25mm×9m	12 巻
3285	50mm×9m	6 巻

優肌絆アルファ

■ 基材 ポリオレフィンフィルム


品番	サイズ	入数 / 化粧箱
3521	12mm×7m	24 巻
3522	25mm×7m	12 巻
3525	50mm×7m	6 巻

優肌絆プラスチック

■ 基材 ポリオレフィンフィルム

品番	サイズ	入数 / 化粧箱
3511	12mm×7m	24 巻
3512	25mm×7m	12 巻
3515	50mm×7m	6 巻

●このカタログの内容は 2016 年 6 月現在のものです。

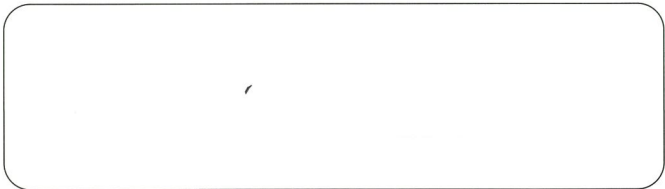

●お問い合わせは

株式会社ニトムズ

TEL 0570-007-006 FAX 0120-210-679

使用上のご注意

- 本品は医療用以外には使用しないでください。
- かゆみ・かぶれ・湿疹などの症状が現れたときには、すみやかに使用を中止してください。
- 傷口には使用しないでください。
- 皮膚やテープを引っ張った状態や縮めた状態では使用しないでください。
- テープを固定するときには、上からしっかりと押さえるようにしてください。
- 直射日光を避け、湿度の少ない涼しい場所に保管してください。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

株式会社ニトムズ