医療安全対策におすすめします



プレカットタイプで
テープカット作業を軽減
抜けにくさを追求した
新たな固定テープ

チューブ・ドレーン類固定補助テープ

ミゼアセーフ™W

MM0002
75mm × 75mm　50枚

ミゼアセーフ™W				
品番	サイズ	入数/箱	入数/外箱	JANコード
MM0002	75mm×75mm	50枚	20箱	4582129724020

NEW mini

品番	サイズ	入数/箱	入数/外箱	JANコード
MM0004	50mm×50mm	50枚	20箱	4582129724044

NEW

ミゼアセーフ™W mini

MM0004
50mm × 50mm　50枚

全方向からの「引っ張られる力」をクロス貼りでロック

姉妹品



チューブ・ドレーン類固定補助テープ

ミゼアセーフ™X

MM0001　70mm × 85mm　50枚

ミゼアセーフ™X mini

MM0003　55mm × 45mm　50枚

使用上の注意

- 傷口に直接貼らないでください。
- カテーテルに常に負荷がかからないように貼付してください。
- 本品使用中に皮膚障害の症状が生じた場合は、使用を中止するなど、適切に対処してください。
- 本製品はチューブ類を固定する用途の製品です。無理な剥離により皮膚を損傷する恐れがありますのでご注意ください。
- 著しく乾燥している、または水にぬれた肌、高温多湿環境では固定性が確保できない場合があります。

カタログご利用の皆様へ

● 製品についてのお問い合わせは　TEL 0570-007-006　FAX 0120-210-679

● このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。(2026年9月現在)

※ ミゼアセーフは、Nittoグループの商標です。

Nitto 株式会社ニトムズ

*ニトムズは、日東電工株式会社(Nitto)のグループ企業です。

ニトムズ医療材製品サービスサイト https://medical.nitoms.com


EF 26・09 (EF)

Nitto
Innovation for Customers

ミゼンにアンゼンをめざして

チューブ・ドレーン類固定補助テープ

ミゼアセーフ™W

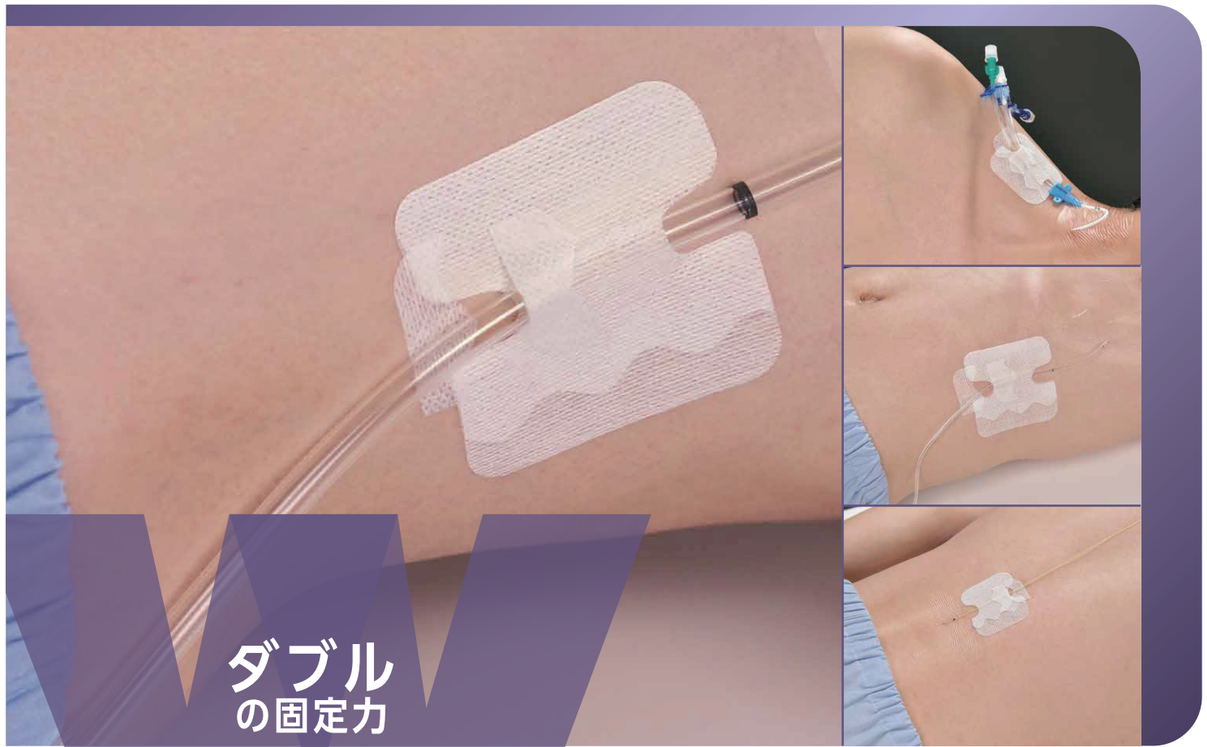

強さと優しさを実現した
新たな固定テープ

株式会社ニトムズ

医療現場の「抜去リスク」で お悩みではありませんか？

医療現場で起こるインシデントがもたらす負担は
その後のリカバリーを含め決して小さくなく、
中でもチューブ・ドレーン類の抜去リスクには
お困りの医療機関も少なくないでしょう。
“未然に安全”をめざす「ミゼアセーフ」は
そんな現場のお悩みから誕生しました。



【抜去リスクの諸要因】

認知症 せん妄 / 不快感 違和感 / 体動 / テープ 固定力 不足 / 移動時 移乗時

【インシデント発生後フロー（例）】

抜去発生

インシデントレポート

患者様の状態観察

再挿入

患者様ご家族へ説明



一次処置

血液曝露による感染リスク

看護師から医師へ報告

医師から看護師へ指示

スタッフ確保 物品準備 寝衣・シーツ交換 等

医療従事者様・患者様にとって大きな負担が生じる

- タイムロス
- コストアップ


- 身体的ストレス
- 精神的ストレス

抜去
リスクに
ダブル
の固定力

“安全”それがみんなの願い
安全を追求した
今までにない固定テープ

ミゼアセーフ™W


特殊な形状、粘着技術で
抜去リスクを軽減。
2枚のテープがチューブを上下から
包み込む形状で多種多様な
チューブ類をしっかり固定します。

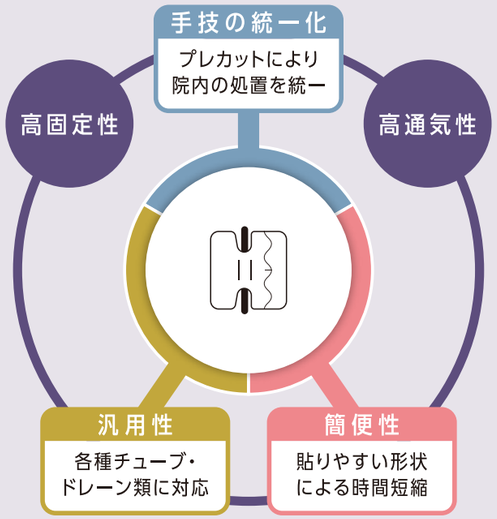




上下のテープで多様な太さのチューブ類をしっかり固定

チューブ固定力が向上

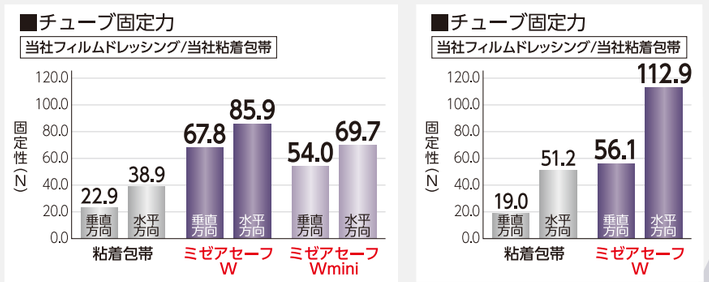


重ね貼り力でチューブをしっかり固定

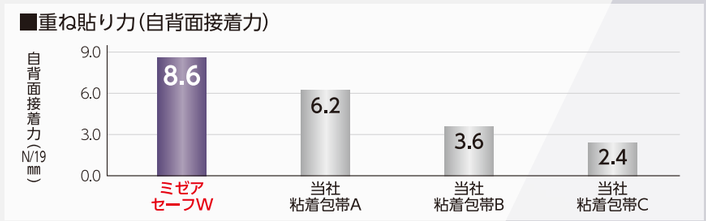

両面テープと重ね貼りの相乗効果


チューブを上下左右からしっかり固定。
構造で穿刺部の動きを最小化。



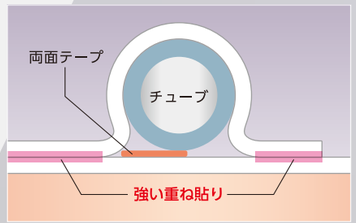

通気性を高める独自のウェーブ塗工™

粘着部分と非粘着部分が交互に波状パターンを形づくる、Nitto独自の粘着技術。高い通気性を確保し、むれやかぶれの要因を軽減します。

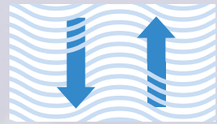




チューブを取り出すための形状




縦方向に対する力を逃す幅広スリット

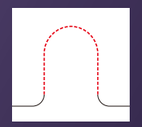


端部結合による自然な重なり

上層部と下層部二枚が自然に重なり合い一体化します。下層部が下地となりチューブと皮膚が直接接触しません。

チューブの滑り・ズレを防ぐ両面テープ

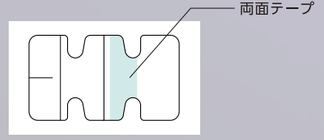


様々な方向に対して安全性を高める2枚の補強用テープ

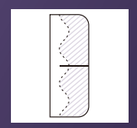

ミゼアセーフ™W ご使用例

ミゼアセーフ™W固定例

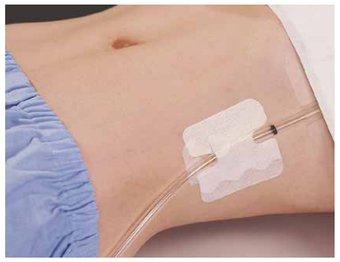


胸腔ドレーン



PTGBD/PTCD



膵管チューブ

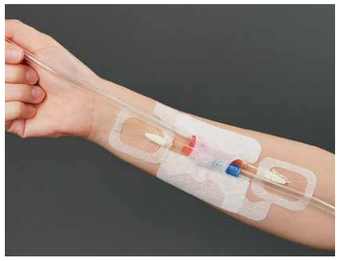


透析用血液回路

ミゼアセーフ™Wmini固定例



中心静脈カテーテル（CV）

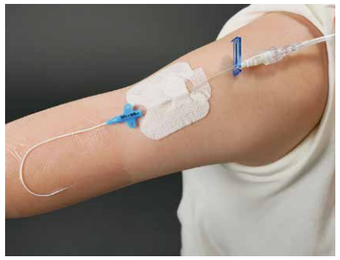

末梢挿入型中心静脈カテーテル（PICC）



動脈カテーテル（Aライン）




硬膜外カテーテル




末梢静脈カテーテル

ミゼアセーフ™W ご使用方法


動画でもご覧いただけます

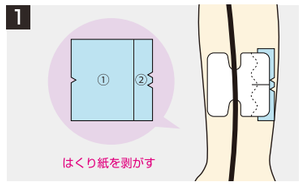


はくり紙①をはがし、チューブの下にもぐり込ませて、チューブがスリット部の中央にくるように皮膚に貼ります。

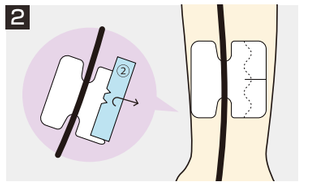


はくり紙②をはがし、残りの部分も貼ります。

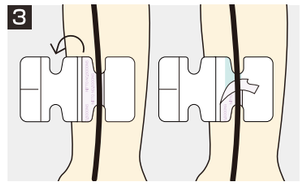


上層部を開いた後、両面テープのはくり紙（NITTO No.5000NS）をはがします。

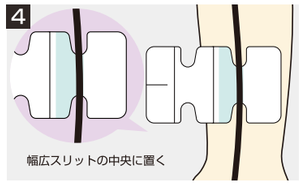


幅広スリット部の中央にチューブを置きます。
※両面テープの中央ではありません。

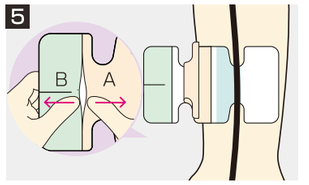


上層部のはくり紙を矢印方向にひっぱるとはくり紙が浮きますので、はくり紙Aをはがしてください。

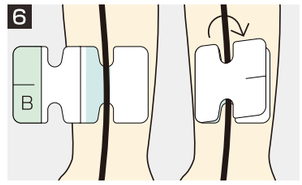


チューブを覆うように上下を密着させます。

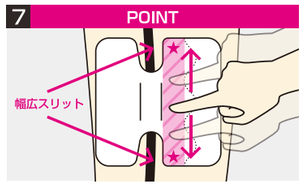


幅広スリット横の両端部（★）が浮かないようにしっかり押さえてください。

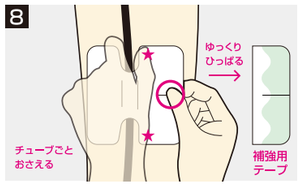


幅広スリット横の両端部（★）が浮かないようにしっかり押さえて補強用テープを本体から取りはずしてください。

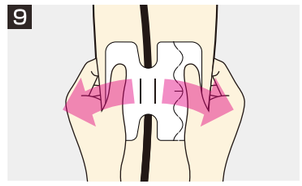


テープ全体をなじませて皮膚に密着させます。

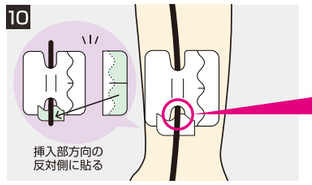


はがれにくくするために、補強用テープをチューブの下にもぐり込ませて、皮膚に直接貼る面積が多くなるように貼ってください。

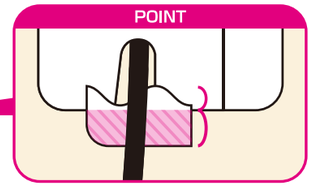


※皮膚側に直接貼る面積が多くなるように補強用テープを貼ってください。

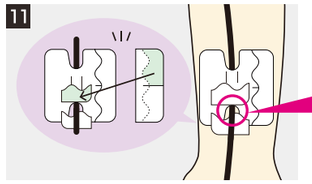


チューブが出てくる付け根のギリギリにチューブにはかからないよう貼ってください。

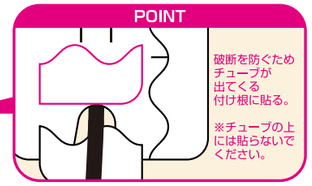

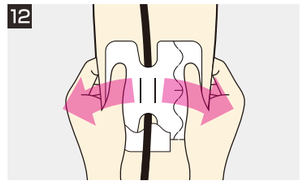


テープ全体をなじませて皮膚に密着させます。

テープのみをはがす場合

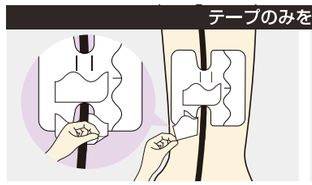

皮膚側に貼ってある補強用テープの角からはがします。

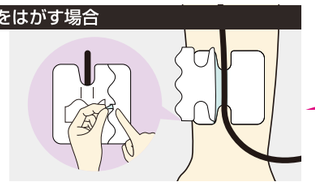

波状部分をつまんで引き上げ、上層部をはがしチューブを露出させます。チューブを両面テープからはずし、テープを皮膚からはがします。

