



優肌パーミエイド。ピロー

品番		サイズ	入数/化粧箱	入数/外箱	JAN ⊐ − ド
1206	【ピロータイプ】	6cm×7cm	50 枚	6箱	4976006713021

※一般医療機器 カテーテル被覆・保護材 JMDNコード 70444000

届出番号:13B1X00203000011

優肌パーミエイド。【】

品番	サイズ	入数/化粧箱	入数/外箱	JAN ⊐ − ド
1204 【スクエアタイプ】	4cm×5cm	100 枚	5 箱	4976006713038
1207 【スクエアタイプ】	6cm×7cm	100 枚	6 箱	4976006713045
1267v【V カットタイプ】	6cm×7cm	100 枚	6 箱	4976006713052
1210 【オーバルタイプ】	10cm×12cm	50 枚	5 箱	4976006713069

※一般医療機器 カテーテル被覆・保護材

JMDNコード 70444000 届出番号: 13B1X00203000010



優肌パーミエイド®

品番	サイズ	入数/化粧箱	入数/外箱	JAN ⊐ − ド
1409	6cm×9cm	100 枚	5 箱	4976006711812
1410	8cm×10cm	50 枚	6 箱	4976006711973
1413	10cm×13.5cm	50 枚	6 箱	4976006711829
1425	10cm×25cm	20 枚	6箱	4976006711980

※一般医療機器 カテーテル被覆・保護材(救急絆創膏)

JMDNコード 70444000(34864000) 届出番号:13B1X00203000001

●パーミエイド、PERME-AID は日東電工(株)の登録商標です。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

Nitto 株式会社ニトムズ *ニトムズは、日来電工は式会社(Nitto)のグループを集です。

本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー 7階 東京営業所 〒140-0002 東京都品川区東品川 4-12-4 品川シーサイドパークタワー 7階 大阪営業所 〒541-0042 大阪市中央区今橋 3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト 15 階 仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5-1-23 仙台Kビル

●お問い合わせは

株式会社ニトムズ TEL 0570-007-006

FAX 0120-210-679

●使用上のご注意

詳細については添付文書をご参照ください。 ●このカタログの内容は2021年3月現在のものです。 ●ニトムズのホームページ https://www.nitoms.com/

豊橋事業所 〒441-3104 豊橋市雲谷町字ハシヅメ11-6

松山事業所 〒799-2425 愛媛県松山市中西外 1057-1

福 岡 営 業 所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-6 第三博多偕成ビル

NJ18 · 03100 (NJ-023)



優肌パーミエイド。


シリーズ

優肌 パーミエイド。 I V 優肌 パーミエイド。 ピロー







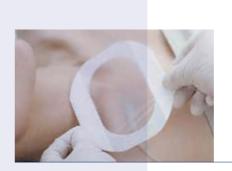




株式会社ニトムズ

すべては「優しさ」から。 カテーテル固定に「安心」「安全」「安定」を お届けします。

特長ある形状と定評ある優肌®ゲル粘着剤により、肌への優しさと固定力を両立させました。 「パーミエイド。ピロー」はクッション材と一体化することで、カテーテルロック部による 皮膚への負担を軽減させつつ、高い作業性と確実な操作性を実現しました。

【優肌®粘着剤=角質保護システム®⟨Skin Protection System⟩の使用により 【フィルム交換時の角質剥離によるかぶれを軽減

角質保護システム®〈Skin Protection System〉は 貼付・剥離による物理的な刺激(角質層の損傷)を抑 えます。従来の粘着剤が貼り替え時に角質層まで剥 離し、痛みやかぶれの原因となるのに対し、角質保護 システム®〈Skin Protection System〉は軟らかく 皮膚の凹凸になじみやすく、優しく剥離することが できます。

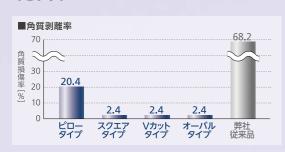

(自社従来品)

角質がほとんど剥がれません

(優肌®ゲル粘着剤)

角質が損傷した皮膚

■フィルム周囲に不織布テープをつけることで■安定したカテーテル固定を実現

通常のアクリル粘着剤を使用したドレッシング フィルムと比較し 2~3 倍の抜去抵抗性を実現。 安全面においても大きな安心を手に入れました。



■カバーフィルムをなくすことで 操作を簡便にしました

貼付手順もシンプルになり、 無駄なゴミを減らします。

LINE-UP

カテーテルの 様々なシーンに 対応できる4タイプの 新形状をご用意



優肌パーミエイド®ピロー 【ピロータイプ】



優肌パーミエイド®IV 【スクエアタイプ】




優肌パーミエイド®IV 【V カットタイプ】



優肌パーミエイド® IV 【オーバルタイプ】

■疼痛・圧痕の調査〈107 施設より〉

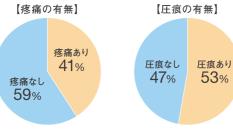

【疼痛・圧痕対策の方法】



不織布部分

補強用不織布テープ(優肌®粘 着剤を使用)でフィルム周囲を 補強しています。

ピロー(クッション)

適度な柔らかさを持つフォーム を使用することで痛みを緩和、 圧痕を軽減します。


ガイド切り込み

操作手順をわかりやすくナビ ゲートする切り込みを入れました。

痛み・圧痕の緩和

ロック部による痛み、圧痕を軽 減し留置針固定の不快感をや わらげます。

■従来品(イメージ)

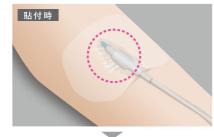



剥離すると、圧痕が見られる場合があります。

■パーミエイド®ピロー





ロック部を浮かすことで、圧痕を最小限に抑えます。

固定力の確保

フィルム部分には、固定力の 高いアクリル系粘着剤を採用 しました。

固定用テープをつけることで、 よりしっかりとした固定を実現 しました。



末梢用

優肌パーミエイド。ピロー 【ピロータイプ】(ロック部の緩衝材付)



◀貼り方動画



STEP 1 パーミエイドピローをスタンバイします



窓部分を矢印の方向に起こして準備します。

STEP 2 チューブの接続部後方にピローがくるようにセットします







ピローは接続部の後方にセット

STEP 3 切込みの入った剥離紙を順に引き抜き 固定用テープで固定します








穿刺部周囲をしっかりおさえます。



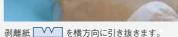



剥離紙「ソソソ」を横方向に引き抜きます。

1番長い補助テープでクッション材の上を固定します。



2番目に長い補助テープで切れ目の隙間 全体を軽くおさえ、なじませ完成です。









テープのはがし方

○片手でテープを 引っ張らない

テープをはがすときは、片手で引っ張らないようにしましょう。皮膚をおさえながら180°折り返すようにはがしましょう。

○はがすときはゆっくりと

テープから皮膚をはがすようにゆっくりはがしましょう。



